

# UNIFIQUE LA SEROLOGÍA INFECCIOSA EN UN SOLO SISTEMA



## INFECCIONES RESPIRATORIAS BACTERIANAS

- VC092** BORDETELLA PERTUSSIS TOXIN VIRCLIA® IgG MONOTEST (cuant.)
- VC016** CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE VIRCLIA® IgA MONOTEST
- VC017** CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC018** CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE VIRCLIA® IgM MONOTEST
- VC019** COXIELLA BURNETII VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC020** COXIELLA BURNETII VIRCLIA® IgM MONOTEST
- VC049** LEGIONELLA PNEUMOPHILA SG 1 VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC050** LEGIONELLA PNEUMOPHILA SG 1 VIRCLIA® IgM MONOTEST
- VC052** LEGIONELLA PNEUMOPHILA SG 1-6 VIRCLIA® IgG+IgM MONOTEST
- VC062** MYCOPLASMA PNEUMONIAE VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC064** MYCOPLASMA PNEUMONIAE VIRCLIA® IgM MONOTEST



## INFECCIONES FÚNGICAS

- VC073** ASPERGILLUS GALACTOMANNAN Ag VIRCLIA® MONOTEST\*
- VC094** INVASIVE CANDIDIASIS (CAGTA) VIRCLIA® IgG MONOTEST



## INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

- VC012** CHLAMYDIA TRACHOMATIS VIRCLIA® IgA MONOTEST
- VC013** CHLAMYDIA TRACHOMATIS VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC015** CHLAMYDIA TRACHOMATIS VIRCLIA® IgM MONOTEST
- VC085** SYPHILIS VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC086** SYPHILIS VIRCLIA® IgG+IgM MONOTEST
- VC032** SYPHILIS VIRCLIA® IgM MONOTEST



## INFECCIONES RESPIRATORIAS VIRALES

- VC002** ADENOVIRUS VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC042** INFLUENZA A VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC045** INFLUENZA B VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC065** PARAINFLUENZA 1 VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC068** PARAINFLUENZA 2 VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC071** PARAINFLUENZA 3 VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC077** RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS VIRCLIA® IgG MONOTEST



## INFECCIONES TORCH

- VC038** CYTOMEGALOVIRUS VIRCLIA® IgG AVIDITY MONOTEST
- VC021** CYTOMEGALOVIRUS VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC022** CYTOMEGALOVIRUS VIRCLIA® IgM MONOTEST (captura)
- VC031** HERPES SIMPLEX 1 VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC039** HERPES SIMPLEX 1 VIRCLIA® IgM MONOTEST
- VC034** HERPES SIMPLEX 1+2 VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC036** HERPES SIMPLEX 1+2 VIRCLIA® IgM MONOTEST
- VC037** HERPES SIMPLEX 2 VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC041** HERPES SIMPLEX 2 VIRCLIA® IgM MONOTEST
- VC083** RUBELLA VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC084** RUBELLA VIRCLIA® IgM MONOTEST (captura)
- VC025** TOXOPLASMA VIRCLIA® IgG AVIDITY MONOTEST
- VC087** TOXOPLASMA VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC088** TOXOPLASMA VIRCLIA® IgM MONOTEST (captura)



## INFECCIONES VACUNABLES

- VC006** DIPHTHERIA VIRCLIA® IgG MONOTEST (cuant.)
- VC054** MEASLES VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC057** MEASLES VIRCLIA® IgM MONOTEST
- VC060** MUMPS VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC061** MUMPS VIRCLIA® IgM MONOTEST
- VC004** TETANUS VIRCLIA® IgG MONOTEST (cuant.)
- VC089** VARICELLA-ZOSTER VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC091** VARICELLA-ZOSTER VIRCLIA® IgM MONOTEST



## INFECCIONES ZONÓTICAS

- VC046** BARTONELLA HENSELAE VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC043** BARTONELLA HENSELAE VIRCLIA® IgM MONOTEST
- VC005** BRUCELLA VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC007** BRUCELLA VIRCLIA® IgM MONOTEST
- VC040** HYDATIDOSIS VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC011** TULAREMIA VIRCLIA® IgG+IgM



## INFECCIONES TRANSMITIDAS POR VECTORES

- VC009** BORRELIA VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC010** BORRELIA VIRCLIA® IgM MONOTEST
- VC008** CHAGAS VIRCLIA® IgG+IgM MONOTEST
- VC059** CHIKUNGUNYA VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC063** CHIKUNGUNYA VIRCLIA® IgM MONOTEST
- VC023** DENGUE VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC024** DENGUE VIRCLIA® IgM MONOTEST (captura)
- VC053** LEISHMANIA VIRCLIA® IgG+IgM MONOTEST
- VC080** RICKETTSIA CONORII VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC082** RICKETTSIA CONORII VIRCLIA® IgM MONOTEST
- VC069** ROSS RIVER VIRUS VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC070** ROSS RIVER VIRUS VIRCLIA® IgM MONOTEST
- VC047** TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC048** TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRCLIA® IgM MONOTEST
- VC078** WEST NILE VIRUS VIRCLIA® IgG MONOTEST\*
- VC079** WEST NILE VIRUS VIRCLIA® IgM MONOTEST\*
- VC033** ZIKA VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC035** ZIKA VIRCLIA® IgM MONOTEST



## OTRAS INFECCIONES

- VC026** EPSTEIN-BARR EBNA VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC027** EPSTEIN-BARR VCA VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC028** EPSTEIN-BARR VCA VIRCLIA® IgM MONOTEST
- VC029** HELICOBACTER PYLORI VIRCLIA® IgA MONOTEST
- VC030** HELICOBACTER PYLORI VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC066** HEPATITIS E VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC067** HEPATITIS E VIRCLIA® IgM MONOTEST (captura)
- VC003** HHV-6 VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC072** HHV-6 VIRCLIA® IgM MONOTEST\*
- VC001** INFECTIOUS MONONUCLEOSIS HETEROPHILE VIRCLIA® IgM MONOTEST
- VC014** LEPTOSPIRA VIRCLIA® IgM MONOTEST
- VC075** PARVOVIRUS VIRCLIA® IgG MONOTEST
- VC076** PARVOVIRUS VIRCLIA® IgM MONOTEST (captura)

\* Disponible próximamente

**VirClia**<sup>®</sup>  
monotest

## VirClia<sup>®</sup> Monotest

El primer sistema CLIA multiparamétrico monotest, autocontenido, y completamente automatizado



**vircell**  
MICROBIOLOGISTS

# VIRCLIA® EL AUTÉNTICO CONCEPTO MONOTEST

Único, completo, transparente

## VIRCLIA®, LA SOLUCIÓN MÁS COMPLETA A TODA LA SEROLOGÍA INFECCIOSA

Con más de 80 productos disponibles, VirClia® es la técnica ideal para analizar parámetros de alto volumen, así como para atender cargas de trabajo reducidas y pruebas especiales.

**Tecnología CLIA:** Mayor sensibilidad y rendimiento

**Formato monotest:** Todos los reactivos están incluidos y listos para usar

**Amplio catálogo:** El panel más extenso de pruebas para enfermedades infecciosas

**Ahorro de trabajo:** Permite el uso de tubos de muestra primarios

**Económico:** No requiere un consumo adicional de reactivos para realizar controles o calibraciones

**Conectividad LIS:** Host-Query, Levey-Jennings

## VIRCLIA® MEJORA EL FLUJO DE TRABAJO EN SU LABORATORIO

VirClia® representa una solución innovadora que puede ayudarle a optimizar sus flujos de trabajo, al tiempo que le garantiza seguridad y tranquilidad en los resultados.

1 tira monotest = 1 Prueba informada

Multiparamétrico = Permite el análisis de cualquier número de pruebas simultáneamente

Control de calidad por tira = Cada prueba incluye un calibrador para su validación interna

Resultados en el día = Evita la acumulación de muestras

Autonomía en el diagnóstico = Disminuye la dependencia de terceros



**VirClia®**  
monotest

## VIRCLIA® MEJORA LA EFICIENCIA EN EL CUIDADO DEL PACIENTE

Una solución centrada en el paciente conduce a una atención de mejor calidad.

Optimización del tiempo de respuesta



Obtención de los resultados en el día



Solicitud de un mayor número de pruebas de laboratorio



Mejor cuidado del paciente

# SOLUCIONES AUTOMATIZADAS




Adaptadas a sus necesidades



## SISTEMA VIRCLIA® LOTUS

- Método: Inmunoanálisis quimioluminiscente
- Modo de operación: *Random access* con carga continua
- Capacidad total de tiras: 39 en el rotor de carga y 40 en el rotor de reacción
- Velocidad: Primeros resultados en 1h, 40 tests en 1h 25m, 80 tests en 2h 30m
- Tubos de muestra: Primarios, diámetros de 12, 13 y 16 mm
- Escáner interno: Identificación positiva de muestras y tiras
- Carga de muestras: 50 tubos primarios, 50 tubos de dilución y 6 botes de diluyente
- Multiparamétrico: Compatibilidad de todas las pruebas VirClia
- Dimensiones: 75 cm x 74 cm x 65 cm

Cat. No. VCLTS-CL

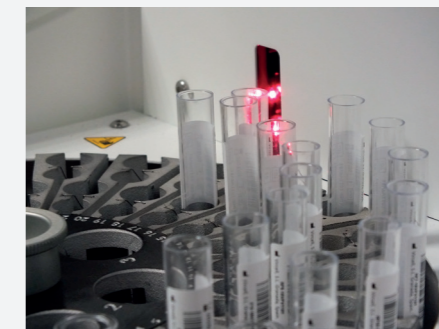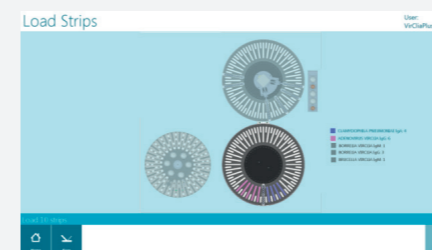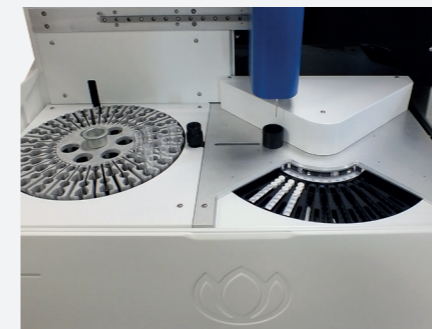

## SISTEMA VIRCLIA®

- Método: Inmunoanálisis con lector dual EIA + CLIA
- Modo de operación: *Random access*
- Capacidad: 24 monotests
- Resultados rápidos: 1 Test en 50 min, 24 tests en 2 h
- Carga de muestras: 96 Tubos primarios
- Gradillas inteligentes: Ubicación automática de las muestras
- Cámara incorporada para facilitar la asistencia remota
- Dimensiones: 64 cm x 57 cm x 45 cm

Cat. No. TB00300-CL

