




El primer kit de reactivos CBC+CRP/SAA integrado en una sola prueba

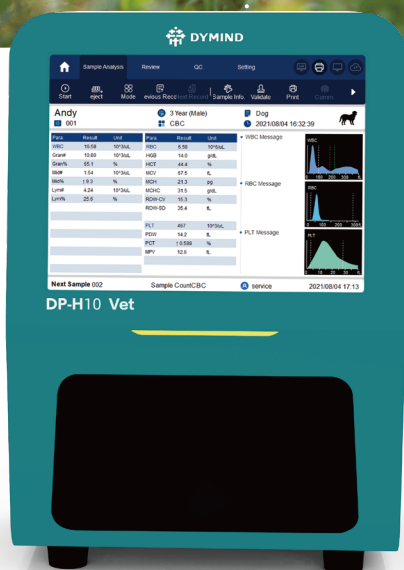

DP-H10 Vet

Analizador de Hematología Automático para Veterinarios

DP-H10 Vet

Analizador de Hematología Automático para Veterinarios

Analizador POCT integrado CBC+CRP/SAA

- Muestras de sangre de tan solo 30µL
- 21 parámetros en 1 prueba
- Tiempo de respuesta corto, se obtiene el diagnóstico en la primera visita
- Mantenimiento gratuito
- Reactivo de cartucho de un solo uso
- Tamaño reducido, adecuado para zonas con espacios limitados



PARÁMETROS

Rendimiento

CBC 10 pruebas / hora
CBC+CRP 9 pruebas / hora
CBC+SAA 9 pruebas / hora

Parámetros

21 parámetros: WBC, LYM%, LYM #, MID%, MID #, GRA #, GRA%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC
2 Paramètres protéiques spécifiques: CRP, SAA
3 Histograma para WBC, RBC, PLT

Canales

Recuento de dos canales

Principio

Método de impedancia para la prueba WBC / RBC / PLT
Método colorimétrico sin cianuro para la prueba de HGB
Inmunonefelometría para la prueba de CRP / SAA

Volumen de muestra

30 µL

Tipo de muestra

Sangre entera venosa

Modo de prueba

CBC, CBC+CRP, CBC+SAA

Comunicación

4 puertos USB, 1 puerto LAN
LIS bidireccional

Impresoras

Impresora térmica incorporada
Admite impresoras externas de forma opcional

Almacenamiento

100,000 resultados de pruebas

Tamaño

300 mm * 270 mm * 390 mm (largo/ancho/alto)

Peso

≤13kg



📍 Décimo piso, Edificio B, Parque de alta tecnología, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P. R. China

☎ +86-755-26008015

🌐 www.dymind.com

☎ +86-755-26008015

✉ intl@dymind.com



Declaración: Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y la apariencia del producto en cualquier momento. Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd se reserva el derecho a la interpretación y decisión de la información de este prospecto.

P/N: SP-DP-H10 Vet[3.0]